

## Upozornění

1. Pokud chcete tento přístroj přesunout, je potřeba ho jemně zvednout a opatrně ho položit; v případě selhání na něj, prosím, tvrdě neklepejte, abyste předešli poruše způsobené dopadem.
2. Pokud chcete tento nástroj přesunout, je potřeba ho držet horizontálně, aby se zabránilo vibracím a nárazům.
3. Nemačkejte přístroj ani neumistujte těžké věci na přístroj, aby se zabránilo deformaci pouzdra, poškození nebo poruše.
4. Je potřeba zvolit odpovídající pracovní napájení v souladu se značkami na tělesu přístroje.
5. Tento nástroj se nesmí používat v koupelně.
6. Abyste zabránili nehodě zásahem blesku, když hřmí, vypněte vypínač napájení a vytáhněte síťovou zástrčku.
7. Není dovoleno vstříkovat žádnou tekutinu do tělesa přístroje, aby se zabránilo poškození přístroje v důsledku zkratu.
8. Pokud se přístroj nebude používat delší dobu, je potřeba vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.

## Technické parametry

1. Provozní napětí: AC 220V--AC 240V
  2. Maximální výkon celého přístroje: 25W 3
- Velikost balení: 26,5\*14\*22,5 (D\*Š\*V) cm

Verze : 20140804

# Kosmetický ozonizér Smart 667



Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste si vybrali náš produkt! Před použitím si, prosím, projděte tuto příručku, abyste zajistili maximální výkon přístroje a bezpečnost při používání. Vhodně uschovejte pro další využití.

## Funkce

Vysokofrekvenční kosmetický přístroj s dotykovým panelem a mikropočítačem je špičkové kosmetické zařízení s níže uvedenými funkcemi:


1. na hloubkové čištění pleti a odstranění mastnoty,
2. na prokrvení pokožky

## Specifikace

1. Jednoduchý a rychlý provoz použitím nejnovější technologie mikropočítačů.
2. Inteligentní a spolehlivý zákrok použitím 10 nastavitelných úrovní.
3. K dispozici jsou různé metody pomocí pulzní vlny.

## Popis ovládacího panelu

- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| ① Snížení času      | ② Snížení energie          |
| ③ ON/OFF            | ④ Zvýšení času             |
| ⑤ Zvýšení energie   | ⑥ Indikátor pohotov. stavu |
| ⑦ Indikátor zapnutí | ⑧ Časový displej           |

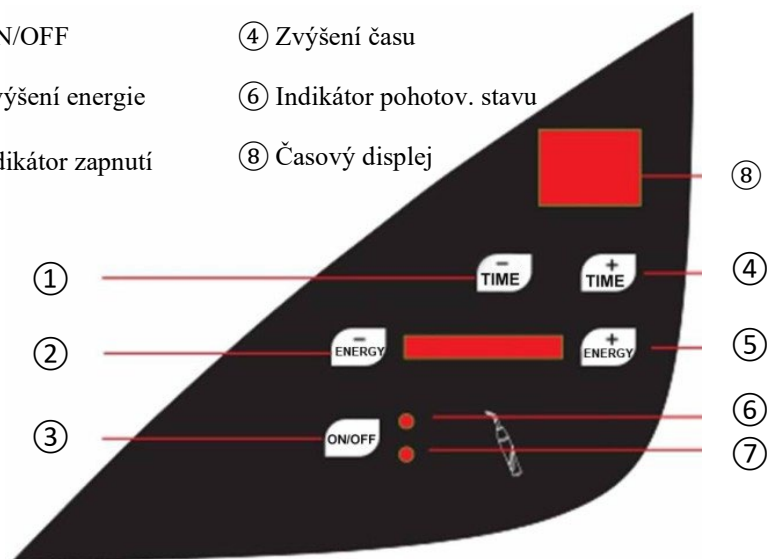

## Provoz

- 1 Vložte elektrodu do rukojeti a dobře ji uchyťte.
- 2 Zapojte, pak uslyšíte „pípnutí“ při spuštění, zobrazí se ⑧ po 30 (minutách); když bude energie nulová, indikátor ⑥ bude červený, přístroj přejde do pohotovostního režimu.  
Po stisknutí tlačítka ③ se indikátor ⑥ změní na zelenou, druhý bod v ⑧ 4 bliká a přístroj se spustí.  
Zvyšte/snížte energii na 10 úrovních stisknutím tlačítek ⑤ / ②
5. Otestujte elektřinu dotykem kovu.
6. Energie by neměla být příliš vysoká, aby se zabránilo jakémukoliv zranění.

## Poznámky

1. Pokud kosmetička provádí ošetření sterilizovanými rukavicemi, ruce by měly být nejprve očištěny a vydezinfikovány alkoholem.
2. Elektrody by měly být sterilizovány a udržovány čisté a suché.
3. Před použitím dezinfikujte ošetřenou část těla klienta alkoholem.
4. Potírejte tuto část anestetikem po dobu 3 minut, a pak začněte aplikací.
5. Během aplikace nezůstávejte příliš dlouho na ošetřované oblasti, abyste se vyhnuli jizvám.
6. Před aplikací si sundejte všechny kovové části (náušnice, náhrdelník atd.)

## Části přístroje



základna



elektroda tyčova - na odstranění nečistot z pokožky

elektroda slza (lžička) - vhodná do těžko dostupných míst

elektroda s tvarem houby - vhodná na dezinfekci celého obličeje