



Stellar SVX-10362-67


Masážní stůl

Vítejte při používání našich produktů.
Před použitím produktů si pozorně přečtěte návod k použití.
Naše společnost si vyhrazuje právo zlepšovat design
a upravovat produkty bez předchozího upozornění.

1. O této příručce


Tato příručka by se měla používat pouze jako reference pro obsluhu tohoto konkrétního modelu. Pokud se tato příručka použije pro jiné účely, naše společnost nenesе žádné příslušné následky a odpovědnost. Všechny informace v této příručce jsou chráněny autorským právem a nesmí se kopírovat a překládat v žádné části této specifikace bez písemného souhlasu naší společnosti.

2. Upozornění

- Při výměně elektrických komponentů nebo údržbě a čištění přístrojů se musí odpojit napájení.
- Zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna, aby se předešlo riziku požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Nestoupejte na toto zařízení.
- Nedovolte dětem hrát si se zařízením a neumísťte ho na místo, kde se ho mohou děti dotýkat. Při odchodu nastavte opěrku zad do nejvyšší polohy.
- Neumisťujte zařízení na vlhká místa, jako je koupelna, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo jiné poruše; Ovladače také držte mimo dosah vody.
- Neumisťujte a nepoužívejte zařízení na místech, kde se maluje/natírá nebo kde se přivádí kyslík.
- Osoby s fyzickými překážkami, poruchami hmatu, duševními poruchami, nedostatkem zkušeností, zdravého rozumu nebo děti nesmí zařízení používat, pokud nejsou sledovány nebo instruovány personálem, který může být odpovědný za jejich osobní bezpečnost.
- Pokud je zástrčka poškozena, v případě jakéhokoliv nebezpečí kontaktujte distributora, servisní středisko nebo pracovníka s příslušnými dovednostmi a zkušenostmi.
- Během manipulace s lůžky se, prosím, ujistěte, že v místě zdvihu není žádná dostupná věc.
- Operaci by měli provádět vyškolení odborníci.
- Původní návod
-  Pouze pro použití v interiéru.


3. Bezpečnostní opatření

- Tento produkt by měla používat zkušená osoba, která musí být obeznámena s konstrukcí produktu, výkonem a návodem a bude provádět pravidelnou údržbu.
- Před instalací, provozem a seřizením si pozorně přečtete tento návod a dobře ho, prosím, uschovejte.
- Tento výrobek se nesmí používat pro jednostranné nebo jednobodové zatížení.
- Dodržujte pravidla bezpečného provozu, produkt se nesmí přetěžovat a aby se zajistilo, že bezpečnostní ochranné vybavení produktu je úplné a spolehlivé, včas eliminuje nebezpečné faktory.
- Pravidelně utahujte šrouby a matice, abyste předešli poruchám způsobeným uvolněním, posouváním, vibracemi a odpadnutím.
- Během údržby nesmí obsluha libovolně rozebírat žádné části lůžka.
- Tento produkt není povoleno provozovat, když má poruchu. Pokud se zjistí abnormální jev nebo abnormální zvuk, musí se okamžitě zastavit a zkontrolovat, po odstranění poruchy je možné pokračovat v práci.
- Obsluha musí být obeznámena s preventivními opatřeními popsány v všech částech návodu, aby byla zajištěna bezpečnost osob a produktu.
- Tento produkt je vybaven třížilovým napájecím kabelem. Napájecí kabel musí být zapojen do třířtorové zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna. Není to pouze proto, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, ale také proto, aby produkt mohl správně fungovat.
- Provozujte výrobek přísně v souladu s výstražným štítkem, který je na něm nalepen.
- Během ovládání zvedání musí být tlačítko nepřetřžitě stisknuto, dokud se produkt nedostane do vhodné polohy.
- Věnujte, prosím, pozornost tomu, že nepřetržitá pracovní doba by měla být max. 2 min. ZAPNUTO a 18 min. VYPNUTO, při provozu motoru.
- Údržbu by měli provádět vyškolení odborníci.
- Po každém ošetření použijte k odstranění prachu nebo skvrn z produktu pouze neutrální roztok.
- Při nastavování každé části držte ruce, nohy a hlavu mimo polohu označenou šipkou.
(Jako je znázorněno na fotografii)

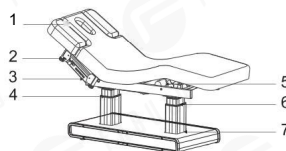


4. Instalace

1. Výrobek umístěte na vhodné místo podle celkového uspořádání, denního nebo umělého osvětlení a provozního stavu salónu nebo domácnosti a uchovávejte ho v čistém, suchém a chladném prostředí.
2. Otevřete krabici, abyste zkontrolovali, zda je výrobek neporušený a zda je příslušenství nebo náhradní díly kompletní. Pokud se vyskytne nějaký problém, kontaktujte, prosím, distributora nebo nás.
3. Instalace
Umístěte výrobek do správné polohy. Upozorňujeme, že k upevnění lůžka není potřeba instalovat na podlahu další šrouby, protože původní design zohlednil stabilitu.
Ujistěte se však, prosím, že je výrobek umístěn na pevném a rovném podkladu, aby se předešlo jakékoliv nehodě. Pokud se výrobek otáčí nebo naklání v důsledku nerovného povrchu, nastavte čtyři kusy plastových nožiček (M10x30) a matic (M10) šestihranným vidlicovým klíčem, které jsou upevněny na spodním panelu, aby se zajistilo, že výrobek bude stabilní.
4. Správně připojte zástrčku produktu ke zdroji napájení. (Jako je znázorněno na fotografii)

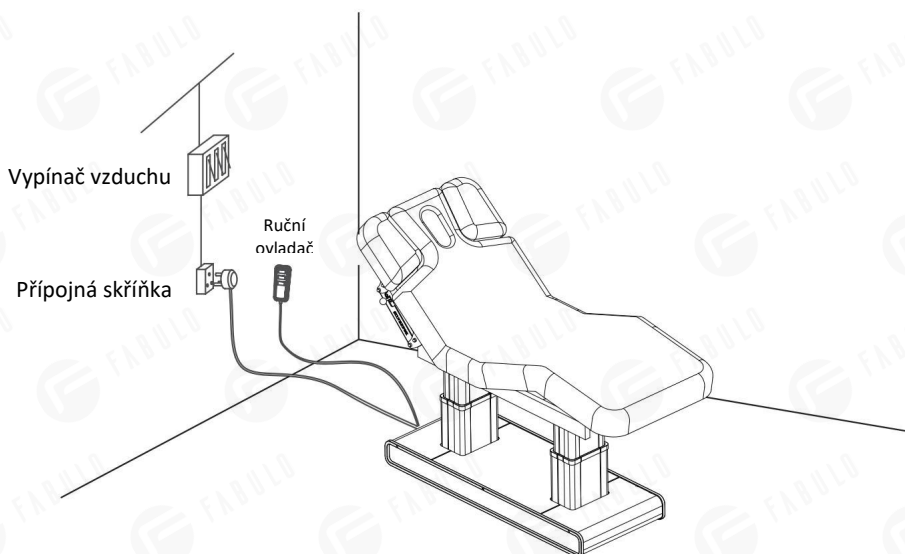

5. Konstrukce produktu


- Tento produkt se skládá z ovládací skříňky, motoru, dřevěné části, hardwaru, plastových částí a kůže. Mezi nimi ovládací skříňka řídí činnost motorů a ručního ovladače.
- Tento produkt má nastavení úhlu opěradla, nastavení úhlu sedadla a nastavení zdvihu, což je celková a integrální konstrukce.
(Jako je znázorněno na fotografii)

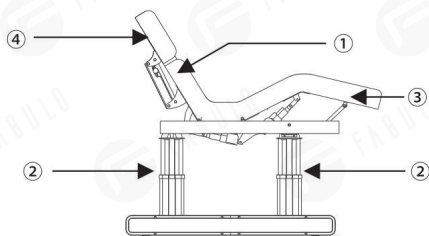

- ① nastavení úhlu opěradla
- ② nastavení zdvihu
- ③ nastavení úhlu opěrky nohou
- ④ nastavení sklonu loketní opěrky (manuální)

6. Návod k použití

Volitelná konfigurace (Ruční ovladač)

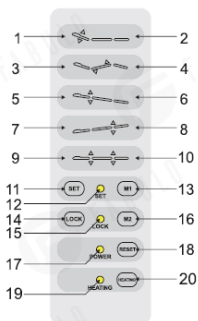

.	Popis	innost
1	Opěradlo jde nahoru	Opěradlo se plynule zvedá stisknutím tlačítka.
2	Opěradlo jde dolů	Opěradlo se plynule spouští stisknutím tlačítka.
3	Opěrka nohou jde nahoru	Stiskněte tlačítko, opěrka nohou se posouvá nahoru, její úhel se zmenší na minimum.
4	Opěrka nohou jde dolů	Stiskněte tlačítko, opěrka nohou se posouvá dolů, její úhel se posune na maximum.
5	Naklání se nahoru v kladném úhlu	Stisknutím tlačítka se úhel sklonu produktu plynule zvyšuje v kladném směru.
6	Naklání se dolů v kladném úhlu	Stisknutím tlačítka se úhel sklonu produktu plynule zmenšuje v kladném směru.
7	Naklání se nahoru v záporném úhlu	Stisknutím tlačítka se úhel sklonu produktu plynule zvyšuje v záporném směru.
8	Naklání se dolů v záporném úhlu	Stisknutím tlačítka se úhel sklonu produktu plynule zmenšuje v záporném směru.
9	Zvedá se	Celá židle/stůl se plynule zvedá stisknutím tlačítka.
10	Spouští se	Celá židle/stůl se plynule spouští stisknutím tlačítka.
11	Zadejte nastavení paměti polohy (volitelné)	Kontrolka se rozsvítí po stisknutí tlačítka na 2 sekundy, a pak vstoupíte do stavu nastavení paměti polohy.
12	Kontrolka nastavení paměti (volitelné)	
13	Nastavení paměti polohy 1 (volitelné)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stisknutím tlačítka "SET" na 2 sekundy vstoupíte do stavu nastavení paměti polohy, indikátor nastavení polohy paměti se rozsvítí. Nastavte požadovanou polohu a stisknutím tlačítka "M1" se akce uloží do paměti. Opusťte stav nastavení paměti polohy a indikátor zhasne. 2. Stisknutím tlačítka se automaticky přesunete do stavu akce v paměti.

Č.	Popis	Činnost
14	Bezpečnostní tlačítko	Podržte stisknuté tlačítko "bezpečnostního zámku" na přibližně dvě sekundy, přičemž se rozsvítí červené světlo kolem tlačítka, žádná tlačítka nelze ovládat kromě tlačítka bezpečnostního zámku. Opětovně stiskněte tlačítko bezpečnostního zámku na přibližně dvě sekundy, červená světla tlačítka zhasnou a všechna tlačítka se vrátí do normálního provozního stavu.
15	Kontrolka bezpečnostního tlačítka	
16	Nastavení polohy paměti 2 (volitelné)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stisknutím tlačítka "SET" na 2 sekundy vstoupíte do stavu nastavení paměti polohy, indikátor nastavení polohy paměti se rozsvítí. Nastavte požadovanou polohu a stisknutím tlačítka "M2" se akce uloží do paměti. Opustíte stav nastavení paměti polohy a indikátor zhasne. 2. Stisknutím tlačítka se automaticky přesunete do stavu úkonu z paměti.
17	Indikátor napájení	Ruční ovladač je správně připojen ke zdroji napájení, kontrolka svítí. V opačném případě svítit nebude.
18	Resetovací tlačítko s jedním tlačítkem	Stiskněte tlačítko, výška lůžka automaticky dosáhne nejnižší polohy.
19	Kontrolka funkce ohřevu (volitelné)	Stisknutím tlačítka se světlo rozsvítí, funkce ohřevu funguje; opětovným stisknutím tlačítka světlo zhasne, funkce ohřevu se zastaví.
20	Ohřev (volitelné)	


Poznámky:

1. Funkce ohřevu je dostupná pouze pro modely s funkcí ohřevu.
2. Různé ruční ovladače by měly být vybrány podle různých konfigurací.

Nastavení osv tlení

Ovládání ručním ovladačem





1. Podržte stisknuté tlačítko "SET"/ "LOCK" na 2 sekundy, abyste vstoupili do režimu regulace osvětlení.
2. Stisknutím "M1" vyberte režim osvětlení (celkem 16 druhů režimů).
3. Mačkáním tlačítka "M2" nastavíte jas (celkem 12 stupňů).
4. Po výběru režimu osvětlení a jasů světla podržte stisknuté tlačítko "SET"/"LOCK", abyste ukončili nastavení světla.

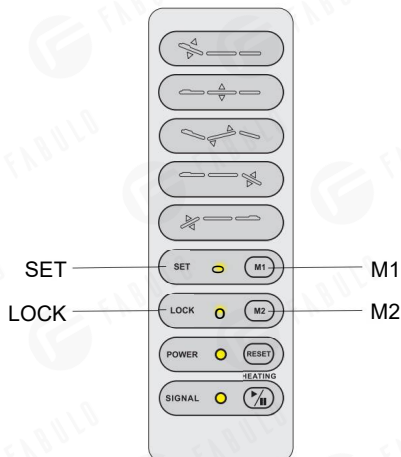

7. Technické parametry

Napájení	AC 100-120V nebo AC 220-240V nebo AC 100-240V, 50/60Hz
Maximální výkon	300W
Teplota prostředí	0°C ~ + 40°C
Relativní vlhkost	30% ~ 90%
Jmenovité zatížení zvedání	175kg
Rozměry balení	204x81x74cm


SVX-10362-67

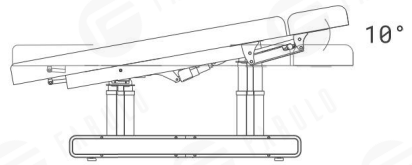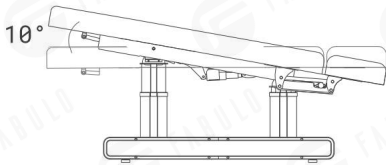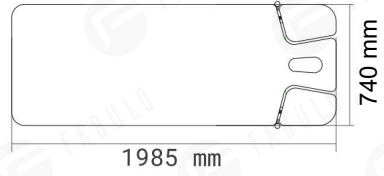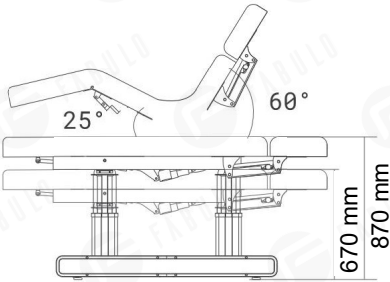

8. Údržba

1. Po každém ošetření použijte pouze neutrální roztok k odstranění prachu, skvrn na kůži, kovových částech nebo jiných částech. Dezinfekční roztoky jako alkohol, kyseliny nebo alkalické roztoky jsou zakázány. Je to proto, aby se předešlo zkrácení životnosti komponentů.
2. Pravidelně (jednou ročně) namažte pohyblivé části.
3. Po použití nechte čalounění v rovině při 180°, abyste předešli prohnutí a pomačkání.

9. Schéma zapojení

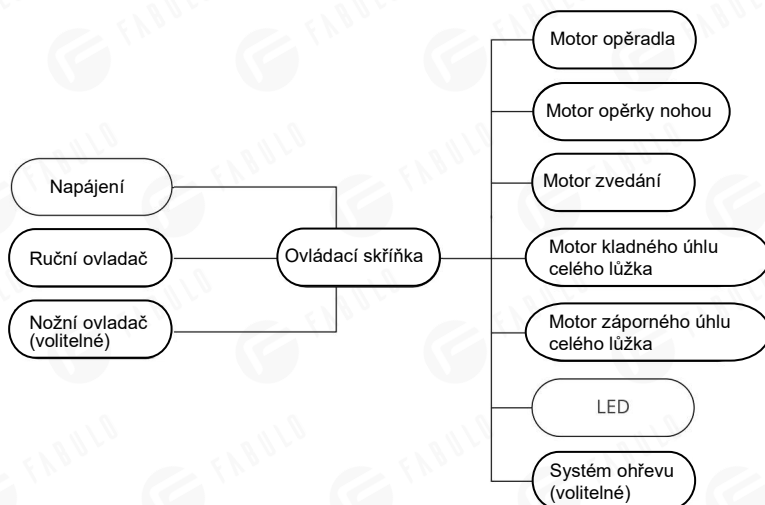

10. Řešení problémů

Jak se projevuje porucha	Příčina	Řešení
Motor nefunguje normálně	1. Napájecí kabel je odpojen nebo není dobře zapojen.	1. Připojte napájecí kabel nebo ho dobře zapojte.
	2. Špatná kvalita ručního ovladače nebo nožního ovladače.	2. Vyměňte ruční ovladač nebo nožní ovladač.
	3. Nízká kvalita ovládací skříňky.	3. Ohledně řešení problémů se obraťte na středisko údržby nebo dodavatele.
	4. Roztržení zadní části motoru.	
	5. Motor je poškozen.	
	6. Po stisknutí tlačítka se lůžko nepohnulo.	1. Posuňte pohyblivou opěrku nohou blízko k pevné opěrce nohou, zkontrolujte, zda je koncový spínač zapnutý, a pak znovu stiskněte tlačítka. 2. Otevřete pevný kryt opěrky nohou a kryt opěradla, zkontrolujte oba konce napájecího kabelu, zda nejsou uvolněné, pokud nastane výše uvedená situace, znovu je připojte. 3. Pokud se problém nevyřeší ani po výše uvedených operacích, obraťte se na středisko údržby nebo dodavatele, aby ho vyřešili.
Abnormální zvuk	1. V rotujících částech chybí mazací olej.	1. Přidejte mazací olej.
	2. V rotačních polohách (jako jsou závěsy, soupravy POM, plynový zdvih) je nedostatek mazacího oleje.	2. Přidejte mazací olej.
	3. Problémy s kvalitou motoru.	3. Vyměňte motor.

Pokud se problém nevyřeší ani po výše uvedených operacích, obraťte se na středisko údržby nebo dodavatele, aby ho vyřešili.



Nevyhazujte stará nebo vadná zařízení do domácího odpadu; mělo by se to dělat pouze prostřednictvím veřejných sběrných míst.

▲ Před použitím zkontrolujte specifikaci produktu. Tato příručka slouží pouze jako reference. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.